

IMPAX EE CD Viewer

2. Información del paciente:

Nombre, fecha de nacimiento, sexo

3. Herramientas comunes: Opciones de diseño, restablecer, cine. Para ver una corta descripción de una herramienta, mueva el puntero sobre el icono y aparecerá una ayuda visual.

4. Anotaciones y mediciones:

Haga clic en la flecha para abrir la lista completa.

1. Panel de series abiertas:


Lista de todas las series abiertas para el estudio que se muestra. Arrastre las series a las áreas de visualización para mostrarlas en el Área de imagen.

The screenshot displays the IMPAX EE CD Viewer interface. On the left, a 'Series' panel (1) lists open series for study 'WS_EMC_PV_DEMO CT, LOCALIZER' with thumbnails and checkboxes. The main area shows a large axial CT scan of the pelvis (2) with a 10mm scale bar. To the right, two smaller axial CT scans (4) are shown with 30mm scale bars. A top toolbar (3) contains icons for navigation and tools. Technical data for the scans is visible at the bottom of each image area, including parameters like SeqNr, BildNr, SL, GT, TP, KV, mAs, and W/L. The AGFA HealthCare logo and '42 HU NOT FOR CLINICAL USE' warning are present in the top right corner.

Introducción a CD Viewer

El visor IMPAX EE CD Viewer incluye varios **preajustes de ventana/nivel** para seleccionar los valores óptimos de brillo y contraste para partes específicas del cuerpo. Use las teclas de función para seleccionar los preajustes.

Acceso directo	Preajuste
F1	Hueso
F2	Hígado
F3	Pulmón
F4	Cráneo
F5	Cerebro
F6	Tejido blando

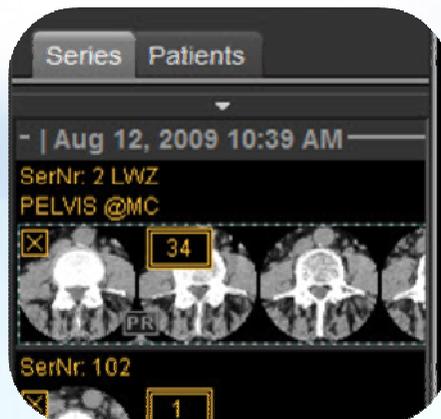

Panel de series abiertas:

Arrastre las series a las áreas de visualización para mostrarlas en el Área de imagen. Haga clic con el botón derecho en las imágenes adicionales para más opciones.


Las Áreas de visualización contienen áreas interactivas: Mueva el puntero sobre la imagen para ver las herramientas en el área de visualización, arrastre o haga clic en el icono para usar la herramienta.

Icono	Herramienta	Descripción
	Zoom	Acercarse o alejarse de la imagen
	Desplazar en panorámica	Mover la imagen en el área de visualización
	Girar	Girar la imagen libremente (360°)
	Voltear – vertical	Voltear la imagen a lo largo de su eje X
	Voltear – horizontal	Voltear la imagen a lo largo de su eje Y
	Retroceder	Mostrar imagen anterior de la serie
	Avanzar	Mostrar imagen siguiente de la serie
	Girar 90° a la izquierda	Giro en sentido contrario a las agujas del reloj de 90°
	Girar 90° a la derecha	Giro en el sentido de las agujas del reloj de 90°
	Eliminar todas las regiones de interés	Eliminar todas las anotaciones y mediciones

[x]	Study Date	Modality
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 10:2...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM

Cuadro de diálogo de selección del estudio:

Si el CD/DVD contiene varios estudios, puede elegir si carga uno o más estudios en el visor. Los archivos de imagen almacenados con el estudio pueden ser muy grandes y en algunos casos solo puede cargarse un estudio a la vez. En este caso, haga clic en la herramienta de selección de estudios en la esquina superior izquierda de la barra de herramientas superior para cambiar el estudio cargado.

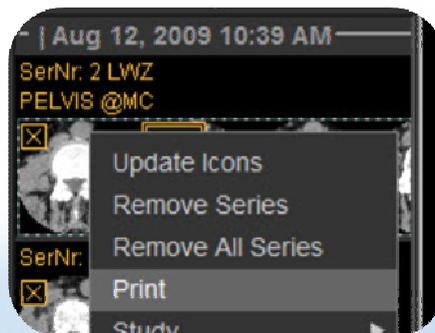

Para imprimir una serie:


- Pulse el botón derecho y haga clic en Imprimir
- Ajuste más parámetros en el cuadro de diálogo de impresión

Interacción con el ratón:

Hacer clic: Selección de Herramienta

Hacer doble clic: Visualización 1:1

ESPACIO + arrastrar: Desplazar en panorámica

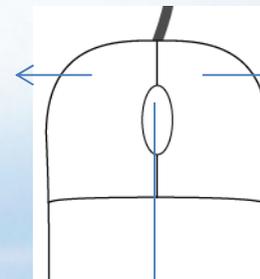

Hacer clic: Menú contextual

Desplazar: Desplazarse por las series

Hacer clic: Activar modo de zoom

ESPACIO + desplazar: Acercarse y alejarse

Mantener y arrastrar: Cambiar ventana/nivel

CRTL + mantener y arrastrar: Ajuste fino de ventana/nivel