

IMPAX EE CD Viewer

2. Potilastiedot: Nimi, syntymäaika, sukupuoli

3. Yleisimmät työkalut: Asetteluvaihtoehdot, palautus, filmi. Näytä työkalujen lyhyet kuvaukset osoittamalla niiden kuvakkeita hiirellä.

4. Merkinnyt ja mittaukset: Avaa luettelo nuolta napsauttamalla.


1. Avoinna olevat sarjat: Luettelo kaikista näytetyn tutkimuksen avoinna olevista sarjoista. Näytä sarjat kuva-alueella vetämällä ne näkymäikkunoihin.

The screenshot displays the IMPAX EE CD Viewer interface. On the left, a sidebar shows a list of series (1, 102, 1) with checkboxes and thumbnails. The main area shows a large axial CT scan of a pelvis. On the right, there are two smaller axial CT scans, one above the other, with technical details for each. The top right corner of the interface shows the text '42 HUN NOT FOR CLINICAL USE' and the 'AGFA HealthCare' logo. The bottom of the interface shows a 'HANGING [8/12/09]' dropdown menu and a '1' button.

CD Viewer -sovelluksen käytön aloittaminen

IMPAX EE CD Viewer sisältää **ikkunatason esiasetuksia**, jotka helpottavat eri ruumiinosille optimaalisten kirkkaus- ja kontrastiasetusten valintaa. Valitse haluamasi esiasetus funktionäppäimiä käyttäen.

| Pikanäppäin | Esiasetus |
|-------------|-------------|
| F1 | Luu |
| F2 | Maksa |
| F3 | Keuhko |
| F4 | Kallo |
| F5 | Aivot |
| F6 | Pehmytkudos |

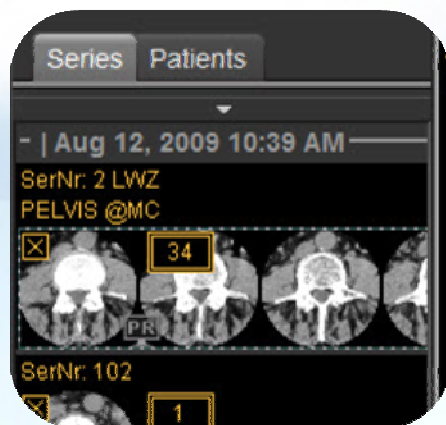

Avoinna olevat sarjat:

Näytä sarjat kuva-alueella vetämällä ne näkymäikkunoihin. Näytä lisää vaihtoehtoja napsauttamalla pienoiskuvia hiiren oikeanpuoleisella painikkeella.


Näkymäikkunan interaktiiviset alueet: Näytä näkymäikkunan työkalut osoittamalla kuvaa hiirellä; käytä työkalua vetämällä tai napsauttamalla sen kuvaketta hiirellä.

| Kuvake | Työkalu | Kuvaus |
|--------|-----------------------|---------------------------------------|
| | Zoomaa | Zoomaa kuvaa lähemmäs tai kauemmas |
| | Panoroi | Siirrä kuvaa näkymäikkunassa |
| | Kierrä | Kierrä kuvaa (360°) |
| | Käännä – pystysuunta | Käännä kuvaa sen X-akselin ympäri |
| | Käännä – vaakasuunta | Käännä kuvaa sen Y-akselin ympäri |
| | Vieritä taaksepäin | Näytä sarjan edellinen kuva |
| | Vieritä eteenpäin | Näytä sarjan seuraava kuva |
| | Kierrä 90° vasemmalle | Kierrä 90° vastapäivään |
| | Kierrä 90° oikealle | Kierrä 90° myötäpäivään |
| | Poista kaikki ROI:t | Poista kaikki merkinnät ja mittaukset |

| [x] | Study Date | Modality |
|--------------------------|----------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Apr 30, 2012 10:2... | NM |
| <input type="checkbox"/> | Apr 30, 2012 8:55... | NM |
| <input type="checkbox"/> | Apr 30, 2012 8:55... | NM |
| <input type="checkbox"/> | Apr 30, 2012 8:55... | NM |

Tutkimusten valintaikkuna:

Jos CD/DVD sisältää useita tutkimuksia, voit ladata yhden tai useampia tutkimuksia kerrallaan. Tutkimuksiin sisältyvät kuvatiedostot voivat olla erittäin suuria, mikä saattaa estää useiden tutkimusten samanaikaisen lataamisen. Vaihda silloin ladattavaa tutkimusta napsauttamalla ylätyökalupalkin vasemmassa yläkulmassa olevaa tutkimusten valintatyökalua.

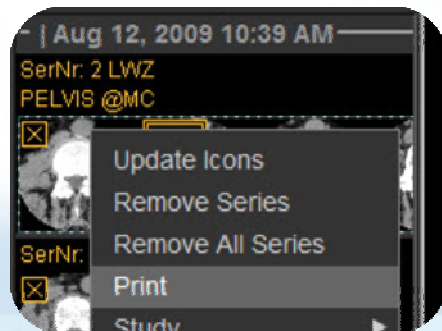

Sarjan tulostaminen:

- Napsauta sarjaa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja napsauta *Tulosta*
- Määritä tarkemmat asetukset tulostuksen valintaikkunassa

Hiiren käyttö:


Napsautus: Valitse työkalu

Kaksoisnapsautus:

1:1-näyttö

VÄLILYÖNTI + veto:

Panoroi

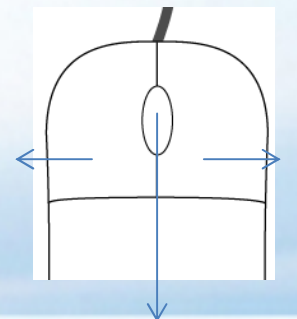

Napsautus:
Kontekstivalikko

Vieritys: Vieritä sarjoja

Napsautus: Aktivoi zoomaustila

VÄLILYÖNTI + vieritys: Zoomaa lähemmäs tai kauemmas

Pito ja veto: Muuta ikkunatasoa

CTRL + pito ja veto: Ikkunatason hienosäätö