


IMPAX EE CD Viewer

2. Informations sur le patient : Nom, date de naissance, sexe

3. Outils communs : Options de disposition, réinitialisation, ciné. Pour obtenir une brève description d'un outil, passez le pointeur au-dessus de l'icône pour afficher l'infobulle.

4. Annotations et mesures : Cliquez sur la flèche pour accéder à toute la liste.


1. Panneau des séries ouvertes : Liste de toutes les séries ouvertes pour l'étude affichée. Faites glisser les séries vers les fenêtres d'affichage pour les afficher dans la zone d'images.

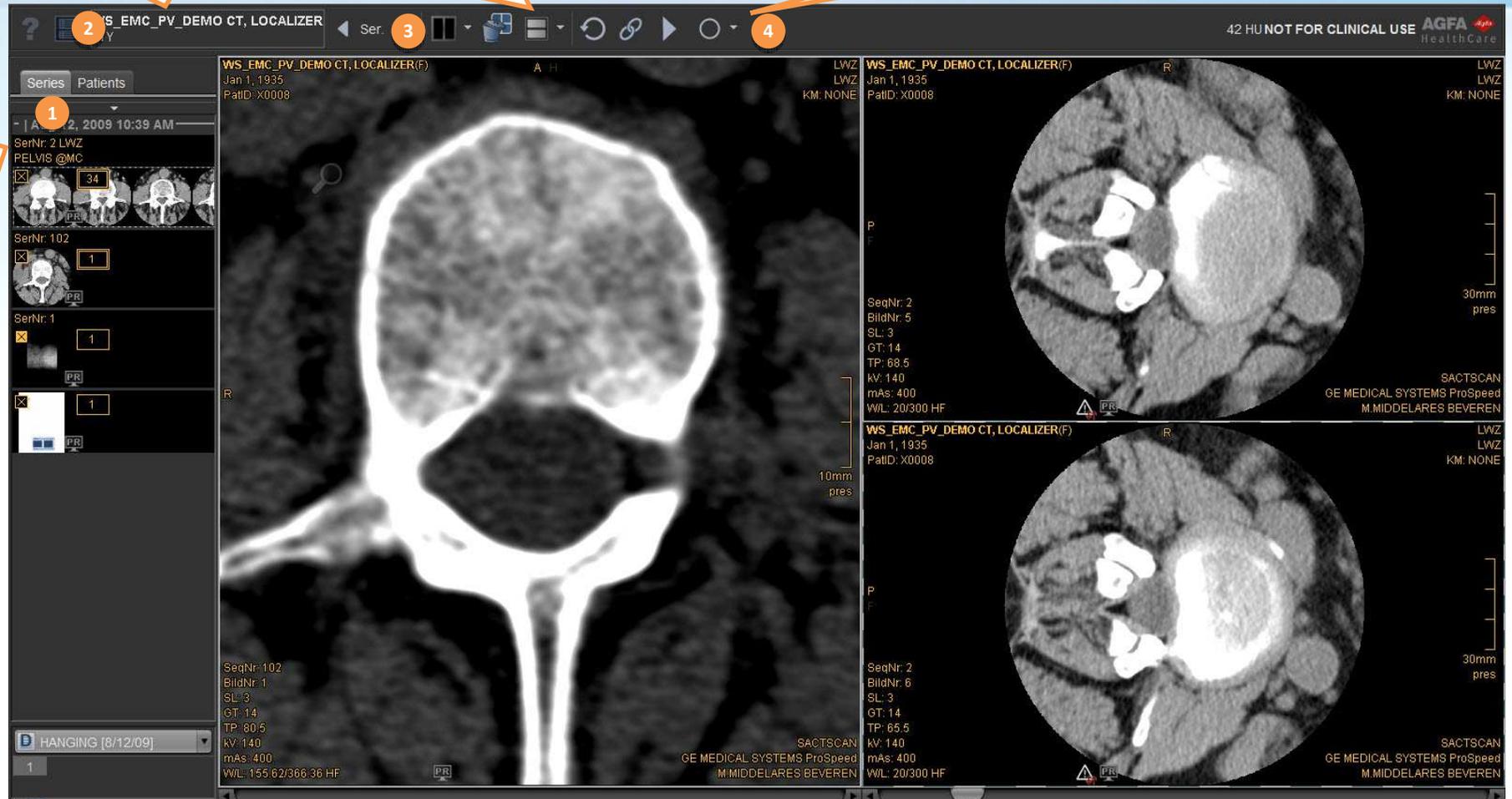

Guide de démarrage du CD Viewer

L'IMPAX EE CD Viewer est fourni avec de nombreuses **présélections pour les valeurs de contraste/brillance** afin de sélectionner les paramètres optimaux de brillance et de contraste pour des zones anatomiques spécifiques. Utilisez les touches de fonction pour sélectionner les pré réglages.

Raccourci	Préréglage
F1	Os
F2	Foie
F3	Poumon
F4	Crâne
F5	Cerveau
F6	Tissus mous

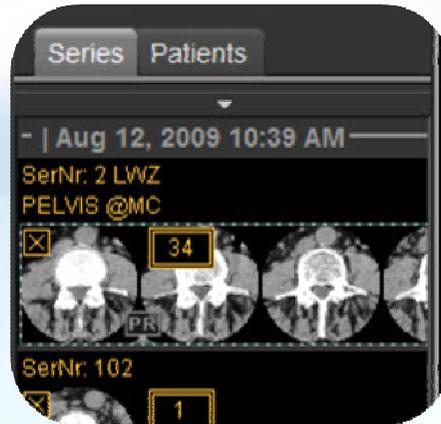

Panneau des séries ouvertes :

Faites glisser les séries vers les fenêtres d'affichage pour les afficher dans la zone d'images. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les vignettes pour obtenir des fonctions supplémentaires.


Les fenêtres d'affichage contiennent des zones interactives : passez le pointeur sur l'image pour afficher les outils dans la fenêtre d'affichage ; faites glisser ou cliquez sur l'icône pour utiliser l'outil correspondant.

Icône	Outil	Description
	Zoom	Effectuer un zoom avant ou arrière dans l'image
	Panoramique	Déplacer l'image dans la fenêtre d'affichage
	Rotation	Fait pivoter librement l'image (360°)
	Retournement – vertical	Retourne l'image le long de l'axe X
	Retournement – horizontal	Retourne l'image le long de l'axe Y
	Défilement vers l'arrière	Affiche les images précédentes de la série
	Défilement vers l'avant	Affiche les images suivantes de la série
	Rotation de 90° à gauche	Fait pivoter l'image dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, de 90°
	Rotation de 90° à droite	Fait pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre, de 90°
ROI	Suppression de toutes les ROI	Supprimer toutes les annotations et mesures

[x]	Study Date	Modality
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 10:2...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM

Boîte de dialogue Sélection de l'étude :

Si le CD/DVD contient plusieurs études, vous avez la possibilité de charger une ou plusieurs études dans la visionneuse. Les fichiers d'images stockés avec l'étude peuvent être très volumineux et, dans certains cas, vous ne pourrez charger qu'une étude à la fois. Dans ce cas, cliquez sur l'outil de sélection d'étude dans le coin supérieur gauche de la barre d'outils supérieure afin de charger une autre étude.

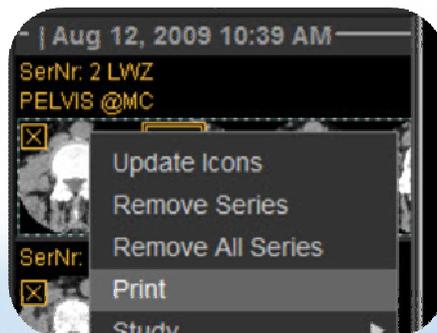

Pour imprimer une série :


- Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez sur *Imprimer*
- Réglez les paramètres avancés dans la boîte de dialogue d'impression

Utilisation de la souris :

Clic : Sélection d'outil

Double-clic : Affichage 1:1

ESPACE + glissé :
Panoramique

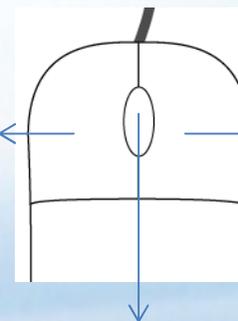

Clic : Menu contextuel

Défilement : Navigation dans les séries

Clic : Activation du mode zoom

ESPACE + défilement : Zoom avant et arrière

Maintenu enfoncé et glissé : Modification des paramètres de contraste/brillance

CTRL + maintenu enfoncé et glissé : Réglage fin des paramètres de contraste/brillance