

Блок просмотра IMPAX EE CD Viewer

2. Данные пациента: Имя, дата рождения, пол.

3. Общие инструменты: Опции компоновки, сброс, циклический просмотр. Чтобы вывести краткое описание инструмента в виде подсказки, проведите курсором мыши по пиктограмме.

4. Комментарии и измерения: Щелкните по стрелке, чтобы открыть полный список.


1. Область открытых серий: Список всех открытых серий, относящихся к отображаемому исследованию. Чтобы отобразить серии в области изображений, перетащите их в окна просмотра.

The screenshot displays the IMPAX EE CD Viewer interface. At the top, a toolbar contains icons for navigation and viewing, with callout boxes 2, 3, and 4 pointing to specific areas. On the left, a 'Series' panel (callout 1) lists open series with thumbnails. The main area shows a large axial CT scan of a pelvis (callout 2) and two smaller axial scans on the right (callout 4). Technical data for the scans is visible at the bottom of each window. The interface includes a patient information bar at the top right and a status bar at the bottom.

Начало работы с CD Viewer

Конфигурация блока просмотра IMPAX EE CD Viewer предусматривает целый ряд предварительно заданных параметров (предустановок) **контраста/яркости**, которые позволяют подобрать оптимальные яркость и контраст в рамках просмотра определенных частей тела. Выбор предустановок осуществляется с помощью функциональных клавиш.

Ярлык	Предустановка
F1	Скелет
F2	Печень
F3	Легкое
F4	Череп
F5	Мозг
F6	Мягкие ткани

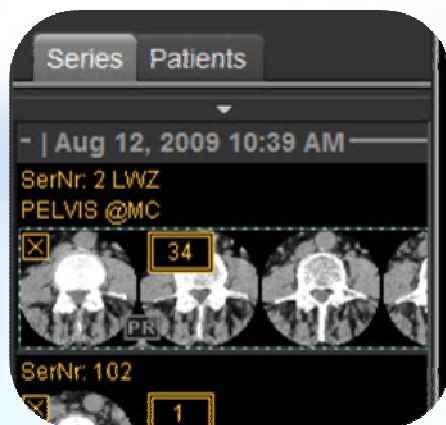

Область открытых серий:

Чтобы отобразить серии в области изображений, перетащите их в окно просмотра. Чтобы перейти к расширенным опциям, щелкните по эскизам правой кнопкой мыши.


В окнах просмотра предусмотрены интерактивные области: Чтобы просмотреть инструменты в окне просмотра, проведите курсором по изображению; чтобы воспользоваться инструментом, перетащите пиктограмму или щелкните по пиктограмме.

Пиктограмма	Инструмент	Описание
	Масштаб	Увеличение или уменьшение изображения
	Панорамировать	Перемещение изображения в рамках окна просмотра
	Повернуть	Свободный разворот изображения (360°)
	Отразить по вертикали	Отражение изображения относительно оси x
	Отразить по горизонтали	Отражение изображения относительно оси y
	Прокрутить назад	Отображение предыдущего изображения серии
	Прокрутить вперед	Отображение следующего изображения серии
	Повернуть на 90° влево	Поворот на 90° против часовой стрелки
	Повернуть на 90° вправо	Поворот на 90° по часовой стрелке
RQI	Удалить все	Удаление всех комментариев и

[x]	Study Date	Modality
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 10:2...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM

Диалоговое окно выбора исследований:

Если на диске CD/DVD присутствуют несколько исследований, вы можете выбрать одно или несколько исследований для загрузки в блок просмотра. Файлы изображений, имеющиеся в исследовании, могут быть достаточно большого размера, в связи с чем в некоторых случаях за один раз может быть загружено только одно исследование. В таком случае, чтобы заменить загруженное исследование, щелкните по инструменту выбора исследований в верхнем левом углу верхней панели инструментов.

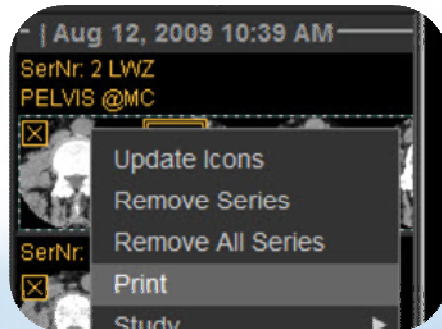


Печать серии:

- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите *Печать*
- Выполните дополнительные настройки в диалоговом окне печати

Использование мыши:

Щелчок: Выбор Инструмента
Двойной щелчок: Формат отображения 1:1
ПРОБЕЛ + перетаскивание: Панорамировать

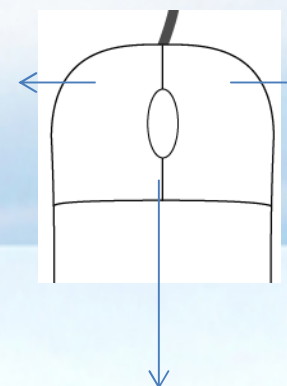

Щелчок:
Контекстное меню

Прокрутка: Прокрутка по сериям

Щелчок: Активация режима масштабирования

ПРОБЕЛ + прокрутка: Увеличение и уменьшение масштаба

Удержание и перетаскивание: Регулировка контраста/яркости

CTRL + удержание и перетаскивание: Точная настройка контраста яркости