

# IMPAX EE CD Viewer

2. Hasta bilgisi: Ad, doğum tarihi, cinsiyet

3. Ortak araçlar: Düzen seçenekleri, sıfırlama, sine. Aracın kısa bir açıklaması için fare imlecini simgenin üzerine getirerek araç ipucunu görün.

4. Notlar ve ölçümler: Tam listeyi açmak için oka tıklayın.

1. Açık seriler paneli: Görüntülenen vakanın açık tüm serilerinin listesi. Görüntü alanında göstermek için serileri gösterim pencerelerine sürükleyin.

The screenshot displays the IMPAX EE CD Viewer interface. The top toolbar contains navigation and tool icons. The left sidebar shows a list of series for the patient. The main viewing area shows a large axial CT slice of the pelvis. Two smaller axial slices are shown on the right. Technical parameters and patient information are displayed around the images.

Series: WS\_EMC\_PV\_DEMO CT, LOCALIZER(F)  
Jan 1, 1935  
PatID: X0008

SeqNr: 2  
BildNr: 1  
SL: 3  
GT: 14  
TP: 80.5  
KV: 140  
mAs: 400  
WVL: 155.62/366.36 HF

SeqNr: 2  
BildNr: 5  
SL: 3  
GT: 14  
TP: 68.5  
KV: 140  
mAs: 400  
WVL: 20/300 HF


SeqNr: 2  
BildNr: 6  
SL: 3  
GT: 14  
TP: 65.5  
KV: 140  
mAs: 400  
WVL: 20/300 HF

42 HU NOT FOR CLINICAL USE AGFA HealthCare

# CD Viewer ile Başlama

IMPAX EE CD Viewer, belirli vücut kısımları için optimum parlaklık ve kontrast ayarlarını seçmek üzere çeşitli **pencere/seviye önayarları** ile gelir. Önayarları seçmek için fonksiyon tuşlarını kullanın.

Kısayol	Önayar
F1	Kemik
F2	Karaciğer
F3	Akciğer
F4	Kafatası
F5	Beyin
F6	Yumuşak doku

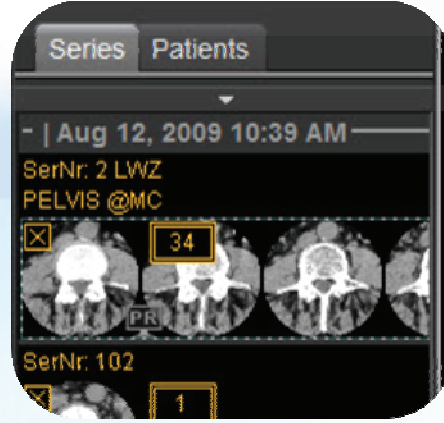

## Açık seriler paneli:

Görüntü alanında göstermek için serileri gösterim penceresine sürükleyin. İlave seçenekler için küçük resimlere sağ tıklayın.


**Gösterim pencereleri interaktif alanlar içerir:** Gösterim penceresinde araçları görmek için fare imlecinizi görüntünün üzerine getirin; aracı kullanmak için simgeyi sürükleyin veya tıklayın.

Simge	Araç	Tanım
	Zum	Görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın
	Kaydır	Görüntüyü gösterim penceresinde hareket ettirin
	Sıfırla	Görüntüyü Başlangıç Durumuna Sıfırla
	Döndür - yatay	Görüntüyü x ekseninde döndürün
	Döndür - dikey	Görüntüyü y ekseninde döndürün
	Geri gel	Serideki önceki görüntüyü gösterin
	İleri git	Serideki sonraki görüntüyü gösterin
	90° sola döndür	Saat yönünün aksi yönünde 90° dönüş
	90° sağa döndür	Saat yönünde 90° dönüş
	Tüm ROI'leri sil	Tüm notları ve ölçümleri silin

[x]	Study Date	Modality
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 10:2...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM

## Vaka seçme iletişim kutusu:

CD/DVD birden fazla vaka içeriyorsa görüntüleyiciye bir veya daha fazla vaka yüklemeyi seçebilirsiniz. Vaka ile kayıtlı görüntü dosyaları çok büyük olabilir ve bazı durumlarda tek seferde sadece bir vaka yüklenebilir. Bu durumda üst araç çubuğunun sol üst köşesindeki vaka seçme aracına tıklayarak yüklü vakayı değiştirin.

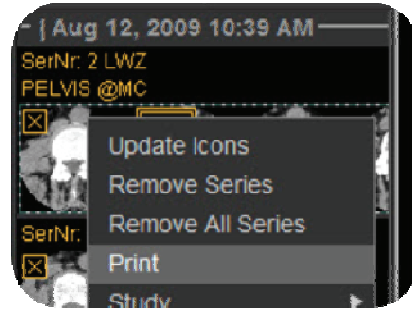


## Seri yazdırmak için:

- Sağ tıklayın ve *Yazdır*'a tıklayın
- Yazdırma iletişim kutusunda ilave ayarları yapın

## Fare etkileşimi:

**Tıkla:** Araç seçimi  
**Çift tıklama:** 1:1 ekran  
**SPACE + sürükle:** Kaydır

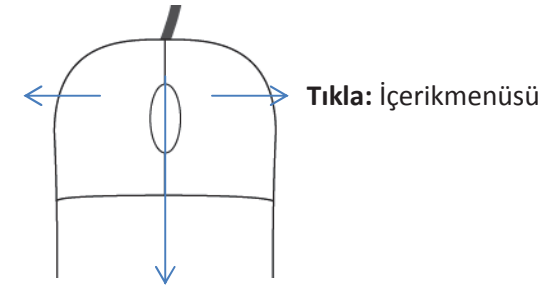

**Çevir:** Seri içinde gezin  
**SPACE + çevir:** Yakınlaştır uzaklaştır  
**Tut ve sürükle:** Pencere/seviye değiştir  
**CTRL + tut ve sürükle:** Pencere/seviye ince ayarı