


IMPAX EE CD Viewer

2. 患者信息: 姓名、出生日期和性别

3. 常用工具: 布局选项、重置和连续播放查看器。要获取工具的简要说明, 请将指针移动至图标上方查看工具提示。

4. 注释和测量: 单击箭头以打开完整列表。


1. 打开序列面板: 已显示检查的所有已打开序列的列表。将序列拖动至视口以使其显示在影像区域中。

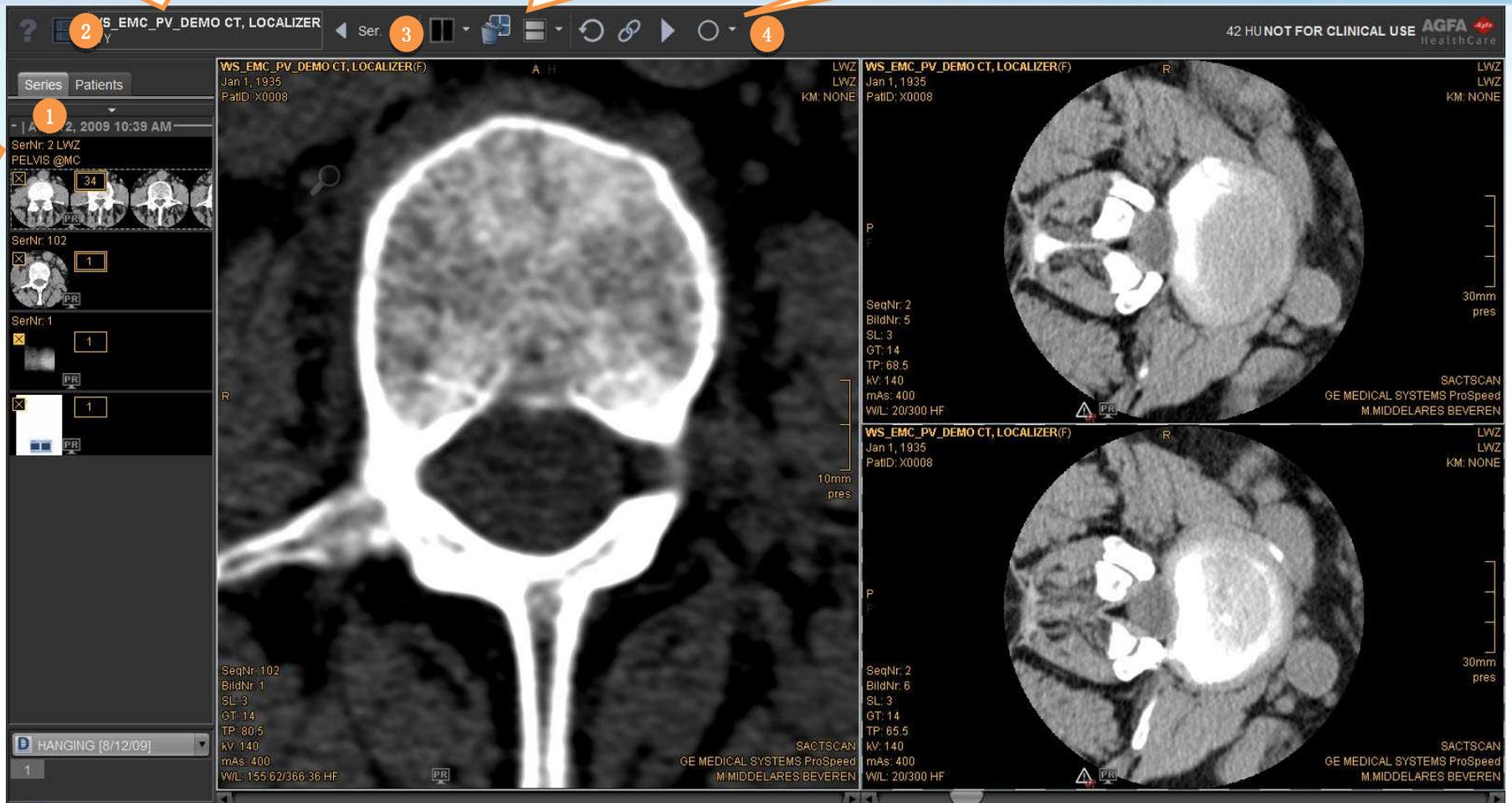

CD Viewer 入门

IMPAX EE CD Viewer 随附了各种**窗宽窗位预设**，以选择特定检查部位的最佳亮度和对比度设置。使用功能键选择预设。

快捷方式	预设
F1	骨骼
F2	肝脏
F3	肺部
F4	颅骨
F5	大脑
F6	软组织

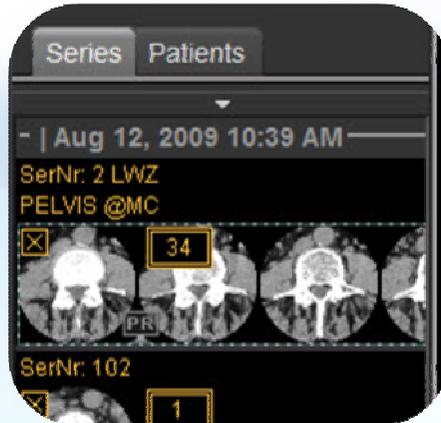

打开序列面板:

将序列拖动至视口以使其显示在影像区域中。右键单击缩略图以获得更多选项。


视口包含活动区域: 将指针移动至影像上方以查看视口中的工具；拖动或单击图标以使用工具。

图标	工具	描述
	缩放	放大或缩小影像
	平移	移动视口中的影像
	旋转	自由旋转影像 (360 度)
	垂直翻转	沿着 x 轴翻转影像
	水平翻转	沿着 y 轴翻转影像
	向后滚动	显示序列中的上一个影像
	向前滚动	显示序列中的下一个影像
	左转 90 度	逆时针旋转 90 度
	右转 90 度	顺时针旋转 90 度
	删除所有 ROI	删除所有注释和测量

[x]	Study Date	Modality
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 10:2...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM
<input type="checkbox"/>	Apr 30, 2012 8:55...	NM

检查选择对话框:

如果 CD/DVD 包含多个检查，则您可以选择将一个或多个检查加载至查看器。与检查一起存储的影像文件可以非常大，但在某些情况下，一次只能加载一项检查。这种情况下，可以单击顶部工具栏左上角的检查选择工具来切换已加载的检查。

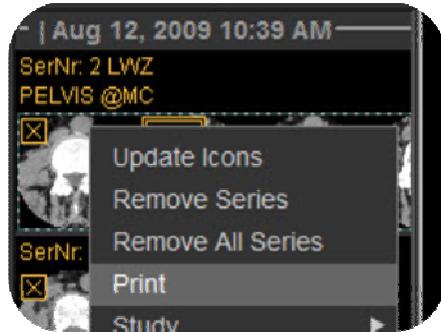


要打印序列:

- 右键单击序列，然后单击 **打印**
- 在打印对话框中调整更多设置

鼠标交互:

单击: 工具选择
双击: 1:1 显示
空格键 + 拖动: 平移

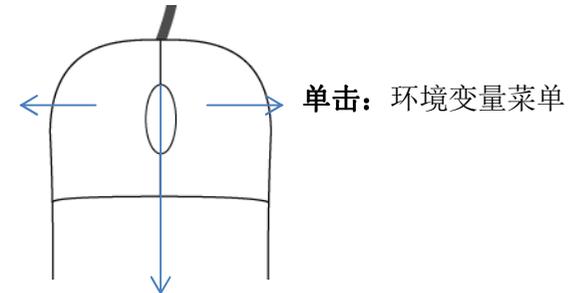

滚动: 滚动查看序列
单击: 激活缩放模式
空格键 + 滚动: 放大和缩小
按住并拖动: 更改窗宽窗位
CTRL 键 + 按住并拖动: 窗宽窗位微调